

# Стерилизатор озоновый «Орион» СК-36л

многофункциональный, низкотемпературный  
регистрационное удостоверение ФСР 2010/07143 от 06 марта 2017 года

## Экспресс-дезинфекция и экспресс-стерилизация:

в хирургии, стоматологии, микрохирургии; в том числе инструментов, содержащих оптические детали; гинекологического инструмента, в хирургии поликлиник, а также термонеустойчивых медизделий – эндопротезов, катетеров, трубок наркозных, масок и т.д.



Рабочий объем: 36 л  
Длительность цикла стерилизации: 40 мин  
Температура в рабочем отсеке (max): 40-45°C  
Внутренние размеры камеры (Ш/В/Г): 35x35x35 см  
Энергопотребление: 70 Вт  
Вес: 16 кг



ООО «Орион-Си»



+7 (495) 222 22 74, 227 74 75  
www.orion-si.ru www.orion-si.com  
e-mail: orionsi@yandex.ru

## Стерилизатор озоновый «Орион» СК-36




Незаменим во всех областях медицины, где необходима оперативная высокоэффективная экспресс-стерилизация инструмента и медизделий.

Озоновый стерилизатор «Орион» СК-36 прекрасно зарекомендовал себя в медпрактике на протяжении многих лет безупречной эксплуатации. Тем не менее и в этой модели произошли качественные изменения, в частности **усовершенствованы герметичность**, а также система **отпирания-запирания** дверцы камеры.

**Улучшенная аэродинамика** обеспечивает равномерную заполняемость камеры озоновооздушной смесью и гарантирует стерилизацию полых инструментов. **Выдвижные полки** упрощают закладку-выкладку инструмента.

**Несомненными преимуществами, характерными для всех модификаций Стерилизаторов «Орион» являются:**

- **низкотемпературный режим** позволяет подвергать стерилизации термонеустойчивые изделия и материалы;
- **короткая экспозиция** (полный цикл стерилизации для СК-16 - 30 мин и не более одного часа для стерилизатора «Орион» СК-250);
- **мобильность**, обеспечиваемая малым весом и отсутствием необходимости подключения установки к кислородной сети медучреждения;
- **максимальная безопасность для медперсонала** обеспечена абсолютной герметичностью и простотой в эксплуатации;
- **низкое энергопотребление (70 Вт)** стерилизатора «Орион» обеспечивает серьезную экономию денежных средств;
- **стерилизация оптических деталей, изделий из полимеров и стекла;**
- **не требует аэрации, не обладает токсичностью;**
- **падающее воздействие на инструмент** в результате отсутствия высокого давления и высоких температур в камере;
- **прозрачность камеры** позволяет наблюдать закладку инструмента и извлечение в рамках рабочей смены операции.

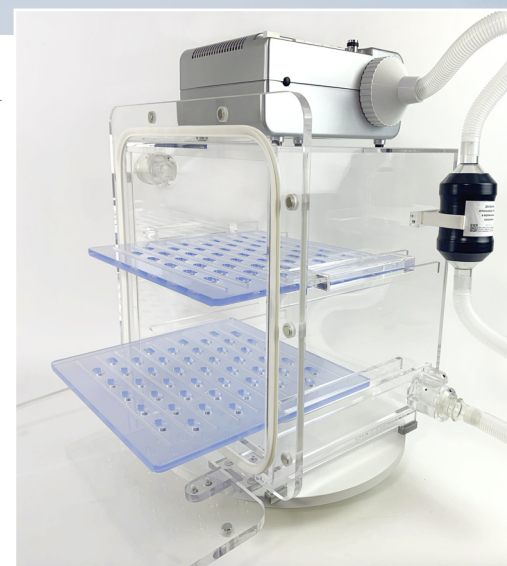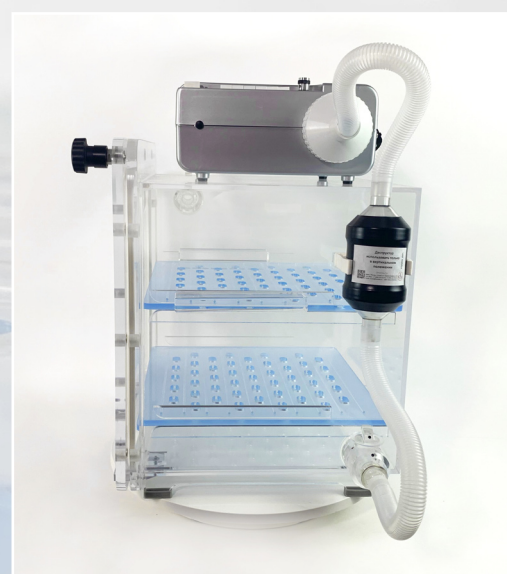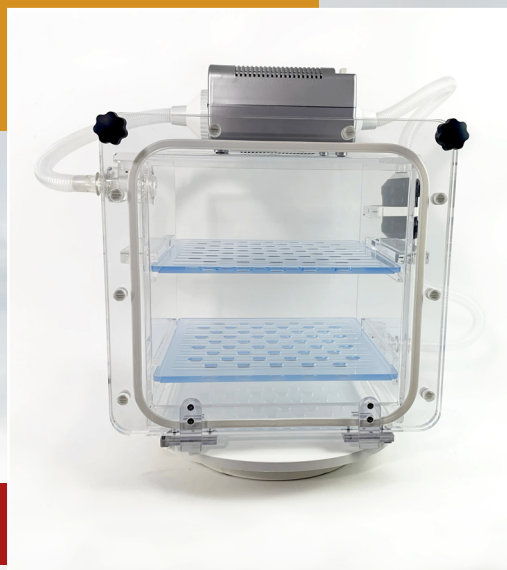

ООО «Медицинский центр «МЕД – ЭЛИТ»  
Инд., 368600 РД, г. Дербент, пер. Чапаева 236 тел./факс: 8(240)4-14-43

Главный Врач  
ООО «МедЭлит»  
Амирсеидов Э.Ш.



### Заключение О работе озоновых стерилизаторов «Орион»

Озоновые стерилизаторы «Орион» (Стерилизатор озоновый "Орион" по ТУ 9451-001-52447360-2005, производства ООО "Орион-Си", Россия. Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07143 от 06.03.2017) используются в оперблоке нашей больницы с 2000 года.

Ежедневно стерилизации в озоновых стерилизаторах подвергаются хирургические инструменты, а также различные термонеустойчивые изделия медицинского назначения.

Использование озоновых стерилизаторов в операционном блоке значительно сократило время (до 20-30 минут) на подготовку хирургического инструментария и позволило повысить оперативную активность стационара.

Несомненно, использование озоновых стерилизаторов привело к экономии денежных средств, так как отпала необходимость в закупке химических стерилиантов.

Немаловажным также является экономия электроэнергии и уменьшение износа хирургического инструмента за счет сокращения времени стерилизации и отказа от применения высоких температур и давления, которые имеет место при применении воздушных стерилизаторов и автоклавов.

Бактериологической лабораторией больницы проведено множество посевов смыва жидкости с хирургического инструментария и изделий медицинского назначения на стерильность после обработки их в озоновом стерилизаторе, положительных результатов не выявлено, что говорит о высоком стерилизационном эффекте озоновых стерилизаторов «Орион».

Озоновый стерилизатор «Орион» надежен и прост в работе и может быть рекомендован к широкому применению.

## Орион-Си

+7 (495) 222 22 74, 227 74 75,  
+7 (495) 227 74 73 (сервис)

www.orion-si.ru, www.orion-si.com  
e-mail: orionsi@yandex.ru