

Стерилизатор озоновый «Орион» СК-16л

многофункциональный, низкотемпературный
регистрационное удостоверение ФСР 2010/07143 от 06 марта 2017 года

Экспресс-дезинфекция и экспресс-стерилизация:

в стоматологии, микрохирургии, в том числе инструментов, содержащих оптические детали; в хирургии поликлиник, для стерилизации небольших объемов инструмента, а также термонеустойчивых медизделий – эндопротезов, катетеров, трубок наркозных, масок и т.д.



Рабочий объем: 16 л
Длительность цикла стерилизации: 30 мин
Температура в рабочем отсеке (max): 40-45°C
Внутренние размеры камеры (Ш/В/Г): 30x20x27 см
Энергопотребление: 70 Вт
Вес: 11 кг



ООО «Орион-Си»



+7 (495) 222 22 74, 227 74 75
www.orion-si.ru www.orion-si.com
e-mail: orionsi@yandex.ru

Стерилизатор озоновый «Орион» СК-16 - новая разработка ООО «Орион-Си», пришел на смену озоновому стерилизатору «Орион» СК-10. Прошел все необходимые испытания и имеет всю разрешительную документацию.




Незаменим в стоматологии, микрохирургии, в хирургии поликлиник; идеален для стерилизации небольших объемов инструмента и медизделий.

В целях улучшения эргономики и повышения пропускной способности Стерилизатора более чем в 1,5 раза увеличен объем камеры; **усовершенствованы герметичность, а также система отпирания-запирания** дверцы камеры.

Улучшенная аэродинамика обеспечивает равномерную заполняемость камеры озоновоздушной смесью и гарантирует стерилизацию полых инструментов. **Выдвижные полки** упрощают закладку-выкладку инструмента.

Несомненными преимуществами, характерными для всех модификаций Стерилизаторов «Орион» также являются:

- **низкотемпературный режим** позволяет подвергать стерилизации термонеустойчивые изделия и материалы;
- **короткая экспозиция** (полный цикл стерилизации для СК-16 - 30 мин и не более одного часа для стерилизатора «Орион» СК-250);
- **мобильность**, обеспечиваемая малым весом и отсутствием необходимости подключения установки к кислородной сети медучреждения;
- **максимальная безопасность для медперсонала** обеспечена абсолютной герметичностью и простотой в эксплуатации;
- **низкое энергопотребление (70 Вт)** стерилизатора «Орион» обеспечивает серьезную экономию денежных средств;
- **стерилизация оптических деталей, изделий из полимеров и стекла;**
- **не требует аэрации, не обладает токсичностью;**
- **щадящее воздействие на инструмент** в результате отсутствия высокого давления и высоких температур в камере;
- **прозрачность камеры** позволяет наблюдать закладку инструмента и извлечение в рамках рабочей смены операции.

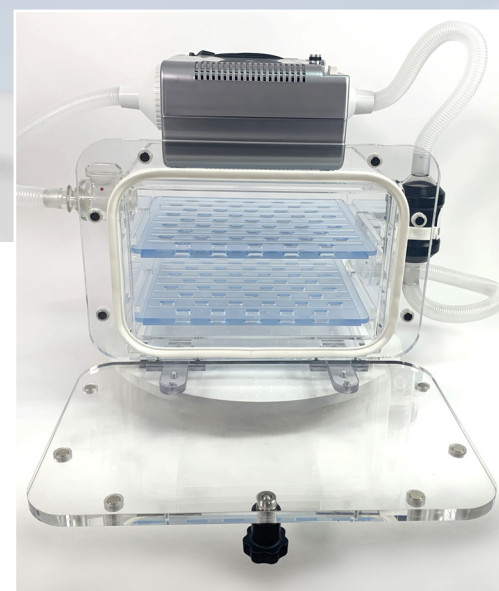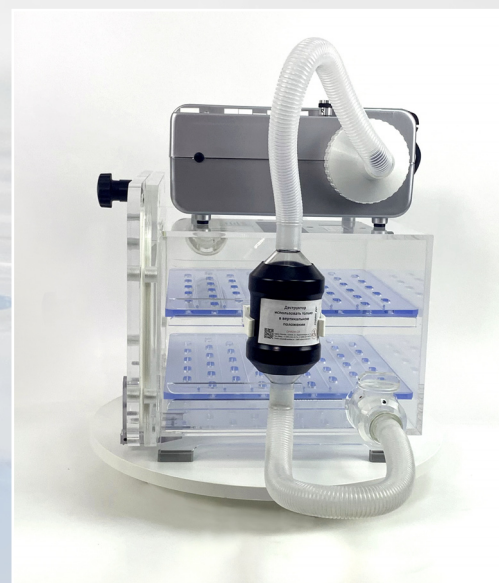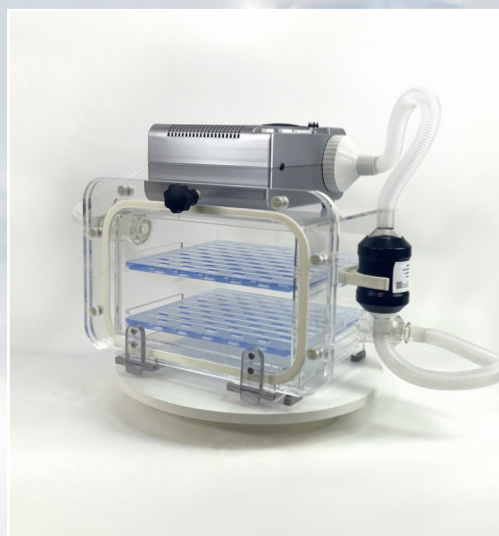

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Октябрьская центральная районная больница" 692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 9
E-mail: pkcrb@mail.primorye.ru

ОТЗЫВ

Об эффективности работы озоновых стерилизаторов «ОРИОН-СИ»

Озоновые стерилизаторы «ОРИОН-СИ» используются в операционных КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с 2004г. Ежедневно стерилизации подвергаются хирургически и эндоскопический инструменты. Стерилизация осуществляется в достаточно быстрые сроки. Применение данного стерилизатора позволяет в кратчайшие сроки подготовиться к экстренным оперативным вмешательствам, позволило увеличить оперативную активность в плановом порядке. Удобен и прост в работе. Щадящий режим работы позволяет уменьшить износ инструмента.

03.08.2020г.

И.о. зав. ХО Селин Д.А.



Орион-Си

+7 (495) 222 22 74, 227 74 75,
+7 (495) 227 74 73 (сервис)
www.orion-si.ru, www.orion-si.com
e-mail: orionsi@yandex.ru